


## HOGREFE ONLINE IN ELEFANT® (HSI)

### Aktivierung von Hogrefe Online in Elefant® (HSI)


Nachdem sie Hogrefe Online in unserem Webshop bestellt haben, erhalten Sie nach ein paar Tagen eine E-Mail mit Ihren Zugangsdaten. Zum Aktivieren der neuen Schnittstelle, geben Sie Ihre Zugangsdaten (Schnittstellenaccount) laut Lieferschein über **System → Software einstellen → Reiter Ablauf 2 → unter psychologische Testverfahren „Hogrefe Online (HSI)“** ein (siehe Abbildung):

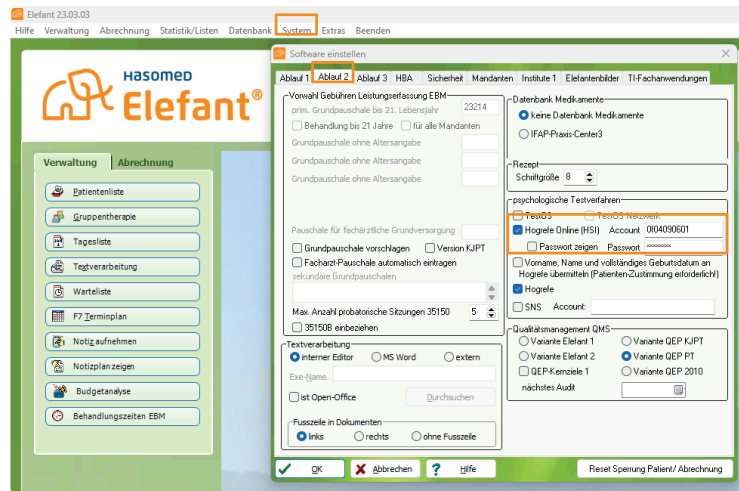

### Testplanung, -durchführung und -auswertung

Die Testplanung, -durchführung und -auswertung erfolgt analog der bisherigen Offline-Version. In der Patientenakte werden über den Reiter **Funktionen** die „**Testverfahren**“ geöffnet.

Hier können Sie die Online-Tests durch Rechtsklick in die Übersicht aktivieren. Wählen Sie Verfügbare Test und Testverfahren (siehe Abbildung):

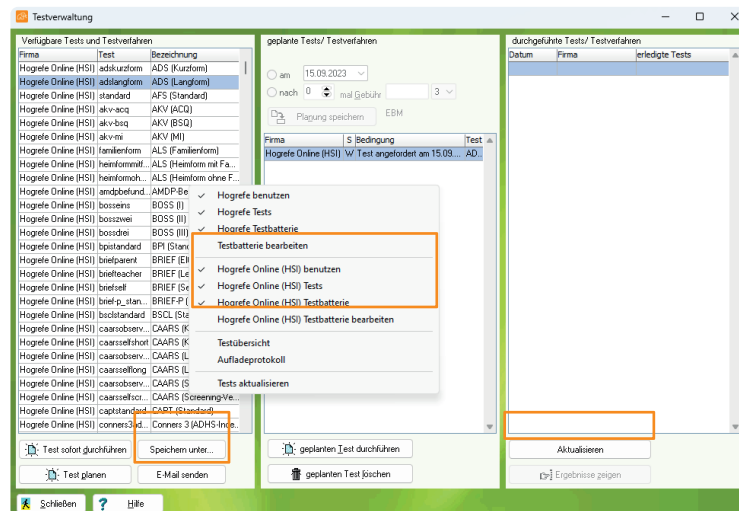

Neu ist, dass die Testdurchführung nur noch online stattfindet. Dazu müssen beide Computer mit dem Internet verbunden sein – Ihrer und der, an dem der Test durchgeführt wird.

Sie können den gewünschten Test an einen Speicherort zur Durchführung ablegen (Netzwerkverzeichnis oder USB-Stick) oder den Link an die/den Patient:in per E-Mail senden (dafür muss die Adresse in der Patientenakte hinterlegt sein). Die/Der Patient:in klickt diesen Link in der Mail an (oder öffnet die Datei im Verzeichnis) und kann den Test online durchführen.

Wenn die/der Patient:in das nächste Mal zu Ihnen kommt oder Sie zwischenzeitlich informiert hat, dass der Test durchgeführt wurde, können Sie das Ergebnis einsehen, indem Sie die **Ergebnisansicht aktualisieren**.