

SMC-B Wechsel - TI-Gateway

 Diese Anleitung beschreibt den Wechsel des Praxisausweises (SMC-B) bei der Verwendung von TI-Gateway.

1. Alte SMC-B aus dem Kartenlesegerät entfernen

Entfernen Sie die alte SMC-B aus dem Kartenlesegerät. Hierfür können Sie zum Beispiel eine EC-Karte verwenden, die Sie gegen die SMC-B drücken. Entnehmen Sie diese aus dem Kartenslot.

 **Hinweis:** Achten Sie bei der Entfernung der SMC-B darauf, wie die Karte eingesteckt war.

2. Neue SMC-B in das Kartenlesegerät einfügen

Stecken Sie die neue SMC-B in den freien Kartenslot ein. Nutzen Sie hierfür wieder eine große Karte, wie zum Beispiel eine EC-Karte, um die SMC-B vollständig in den Kartenslot zu drücken, bis diese einrastet.


3. Konnektor aufrufen

Öffnen Sie einen Internetbrowser und rufen Sie **http://localhost:8080** (ab Version 2.5 **https://localhost:8080**) auf.

Klicken Sie links im Menü unter vKonnektor auf **Verwaltung**, um zum Konnektor zu gelangen.

Es öffnet sich ein neuer Tab mit dem Anmeldefenster zum Konnektor.

Geben Sie hier Ihre Zugangsdaten zum Konnektor ein.

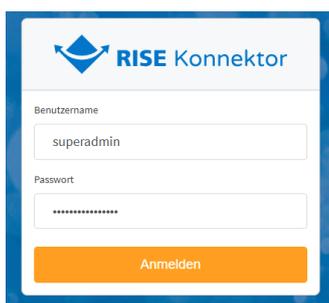

The screenshot shows the login interface for the RISE Konnektor. At the top left is the RISE logo and the text 'RISE Konnektor'. Below this are two input fields: 'Benutzername' (Username) with the value 'superadmin' and 'Passwort' (Password) with a masked password '*****'. At the bottom is an orange button labeled 'Anmelden' (Login).

4. SMC-B Wechsel im Konnektor

Klicken Sie im Konnektor Menü auf **Arbeitsumgebung** und dann auf **Konfiguration:**

Konnektor

Status

Arbeitsumgebung

Benutzerverwaltung

Betriebszustand

Konfigurationsdaten

Leistungsumfang und Grundeinstellungen

Protokolle

Updates

Arbeitsumgebung

Status Konfiguration

Vereinfachte Arbeitsumgebung einrichten

Mandanten

Bitte legen Sie alle Mandanten des RISE-Konnektor fest

Löschen Sie nun den Eintrag der alten SMC-B über den "Löschen-Button":

Welcher Mandant verwendet welche SM-B-Karten?

Bitte wählen Sie je Mandant eine oder mehrere SM-B-Karten aus der Liste aus.

Mandant	ICCSN
M01	<div style="display: flex; align-items: center;"> 80276883110000150883 <div style="margin-left: 10px; position: relative;"> Löschen </div> </div> <div style="margin-top: 5px;"> <input style="width: 100%; border: 1px solid #ccc;" type="text" value="Bitte auswählen..."/> </div>

SM-B-Karten, die noch keinem Mandanten zugewiesen sind

80276883110000162281

Wählen Sie nun die neue SMC-B aus und klicken Sie auf speichern:

Welcher Mandant verwendet welche SM-B-Karten?

Bitte wählen Sie je Mandant eine oder mehrere SM-B-Karten aus der Liste aus.

Mandant	ICCSN
 M01	Bitte auswählen... 

SM-B-Karten, die noch keinem Mandant zugeordnet sind

 80276883110000162281

80276883110000162281

Hinweis: Sie können erst SM-B-Karten wählen, wenn das zugehörige Kartenterminal aktiv ist. Führen Sie die erforderlichen Schritte in der [Kartenterminal-Verwaltung](#) durch.

Speichern

Es erscheint folgende Meldung zur Bestätigung, dass die Änderung erfolgreich war:



5. Abmelden vom Konnektor

Klicken Sie im oberen rechten Feld auf **Abmelden**, um sich vom Konnektor abzumelden:



Hostname: **RISEKonn**

superadmin


Abmelden

Schließen Sie den Internetbrowser.

6. SMC-B in Elefant tauschen


Öffnen Sie den Elefant und klicken Sie im oberen Menü auf **System > Lesegeräte / Peripherie einstellen**.

Es folgt die Ansicht:

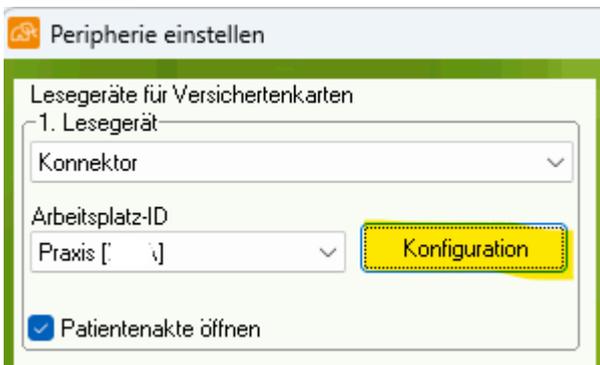

Klicken Sie nun auf **Konfiguration**.

Wählen Sie unter **ClientSystem** > **Mandanten** > **Mandant** > **SMC-Bs** die neue SMC-B aus und klicken Sie auf speichern:

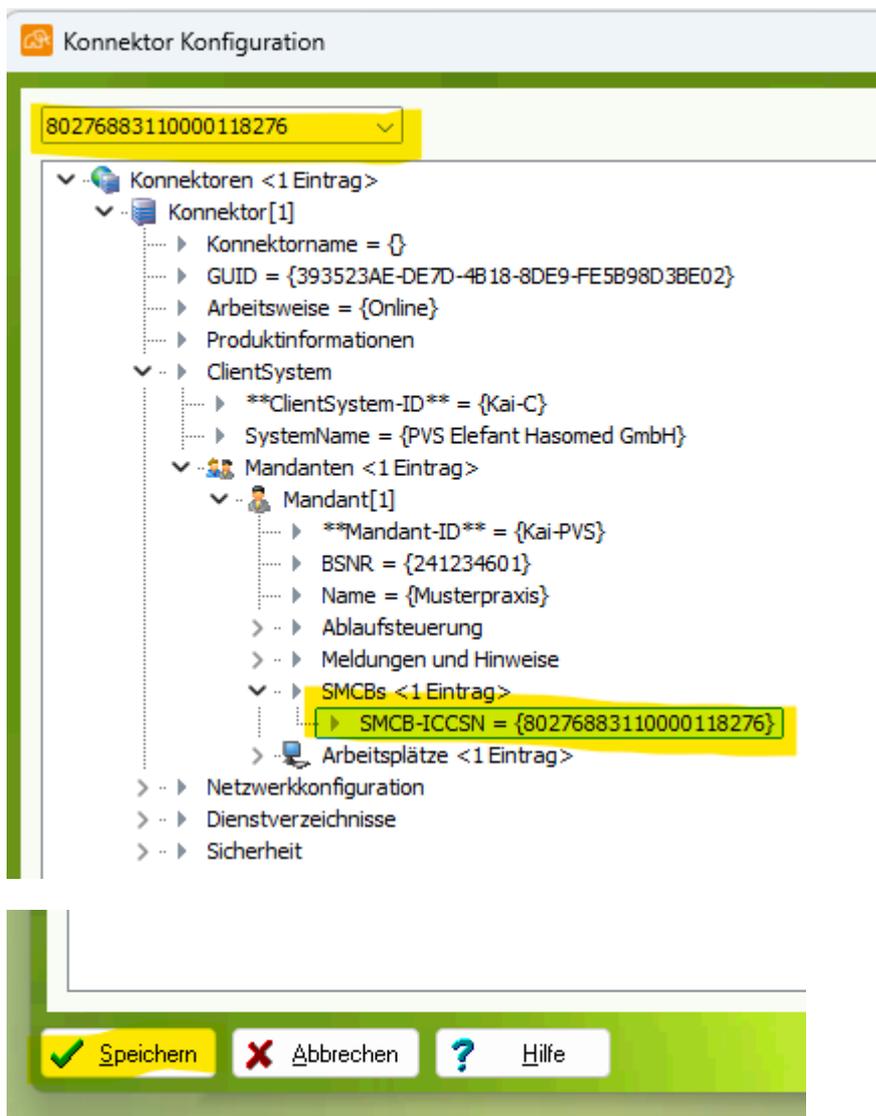

Die SMC-B wurde nun erfolgreich getauscht.