

# gSMC-KT Wechsel - TI-Gateway



Diese Anleitung beschreibt den Wechsel der Gerätekarte des Kartenterminals (gSMC-KT) bei der Verwendung von TI-Gateway.

## 1. Alte gSMC-KT aus dem Kartenlesegerät entfernen

Entfernen Sie die alte gSMC-KT aus dem Kartenlesegerät. Hierfür können Sie zum Beispiel eine EC-Karte verwenden, die Sie gegen die gSMC-KT drücken. Entnehmen Sie diese aus dem Kartenslot.



Achten Sie bei der Entfernung darauf, wie rum die Karte eingesteckt war.


## 2. Neue gSMC-KT in das Kartenlesegerät einlegen

Stecken Sie die neue gSMC-KT in den freien Kartenslot ein. Nutzen Sie hierfür wieder eine große Karte, wie zum Beispiel eine EC-Karte, um die gSMC-KT vollständig in den Kartenslot zu drücken, bis diese einrastet.

## 3. Konnektor aufrufen

Öffnen Sie einen Internetbrowser und rufen Sie **http://localhost:8080** (ab Version 2.5 **https://localhost:8080**) auf.


Klicken Sie links im Menü unter vKonnektor auf **Verwaltung**, um zu Konnektor zu gelangen. Es öffnet sich ein neuer Tab mit dem Anmeldefenster zum Konnektor. Geben Sie hier Ihre Zugangsdaten zum Konnektor ein.

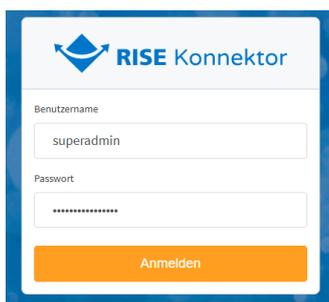


The screenshot shows the login interface for 'RISE Konnektor'. It features a blue header with the logo and title. Below the header, there are two input fields: 'Benutzername' (Username) containing 'superadmin' and 'Passwort' (Password) with masked characters. At the bottom, there is an orange 'Anmelden' (Login) button.

## 4. Pairing aufheben


Klicken Sie im Menü auf **Kartenterminals** und klicken Sie an dem entsprechendem Kartenterminal auf das **Stift-Symbol**:

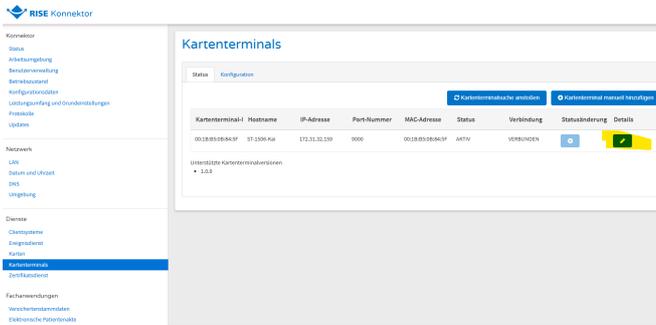

Klicken Sie anschließend auf **"Pairing aufheben"**:

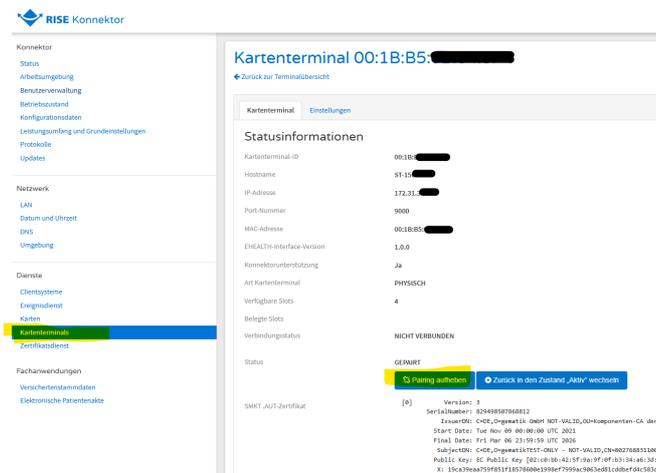

Wählen Sie nun **"Zurück zur Terminalübersicht"**:

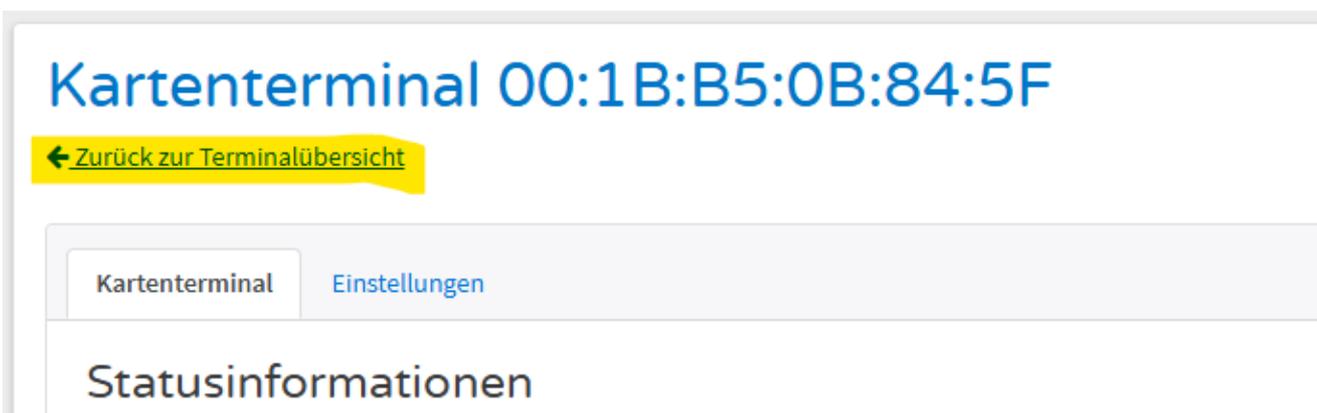

## 5. Neues Pairing durchführen

Klicken Sie auf das **Verbindungssymbol**, um das Pairing zu starten:

# Kartenterminals

Status Konfiguration

Kartenterminalsuche anstoßen Kartenterminal manuell hinzufügen

Kartenterminal-ID	Hostname	IP-Adresse	Port-Nummer	MAC-Adresse	Status	Verbindung	Statusänderung	Details
00:1B:B5:0B:84:5F	ST-1506-Kai	172.31.32.159	9000	00:1B:B5:0B:84:5F	ZUGEWIESEN	NICHT VERBUNDEN		

Unterstützte Kartenterminalversionen

- 1.0.0

Klicken Sie auf **"Pairing durchführen"**, um die Anfrage an das Kartenterminal zu senden:

## Pairing von Kartenterminal 00:1B:B5:0B:84:5F

Wollen Sie ein Pairing des Kartenterminals mit dem Konnektor durchführen?

Kartenterminal-ID **00:1B:B5:0B:84:5F**

Fingerprint des Kartenterminal-Zertifikats **11DAB76073F6EC137484321747237E8C36C24E46DAA0A548FCE0B243AA27CF4E**

Abbrechen

Pairing durchführen

Bestätigen Sie nun das Pairing auf dem Kartenterminal durch klicken auf **"OK"**

**Das Pairing des Kartenterminals wurde erfolgreich durchgeführt**

Sollte das Pairing nicht funktionieren (SICCT Fehler), müssen die Pairing-Blöcke im Kartenterminal gelöscht werden.